


SCHULUNGS- HANDBUCH

Accu-Chek® Solo Mikropumpensystem


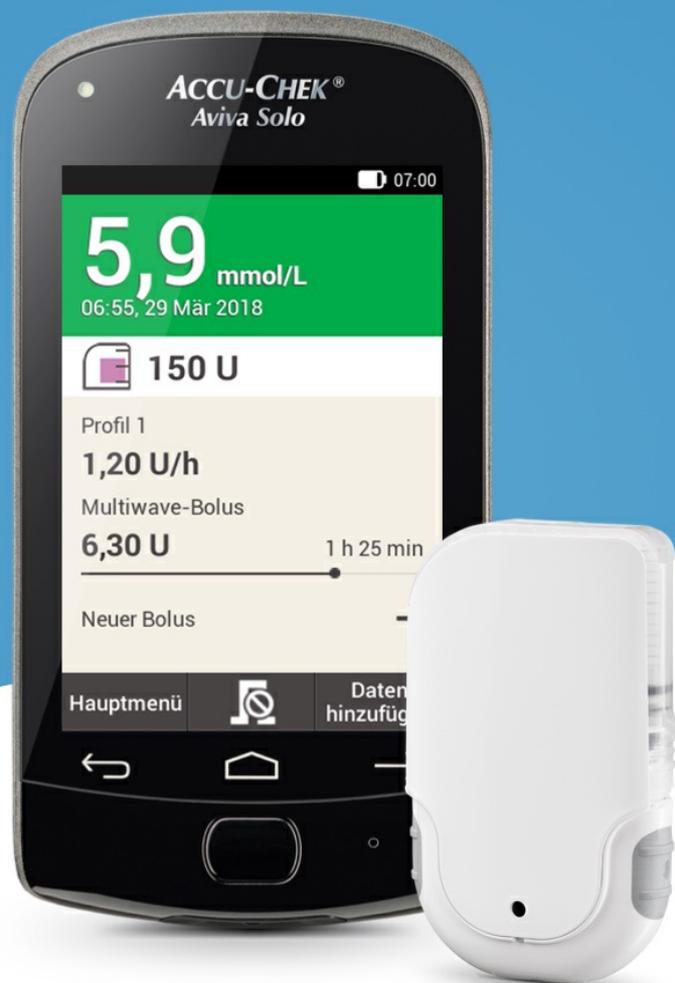


BASALRATENPROFILE ANPASSEN UND HINZUFÜGEN

Gründe für mehrere Basalratenprofile

Es ist sinnvoll, zusätzlich zum normalen Basalratenprofil weitere Basalratenprofile für verschiedene Alltagssituationen zu haben. Sie können bis zu 5 Basalratenprofile im Diabetes Manager programmieren. Besprechen Sie die Verwendung verschiedener Basalratenprofile mit Ihrem Arzt oder Diabetesberater.

Beispiel

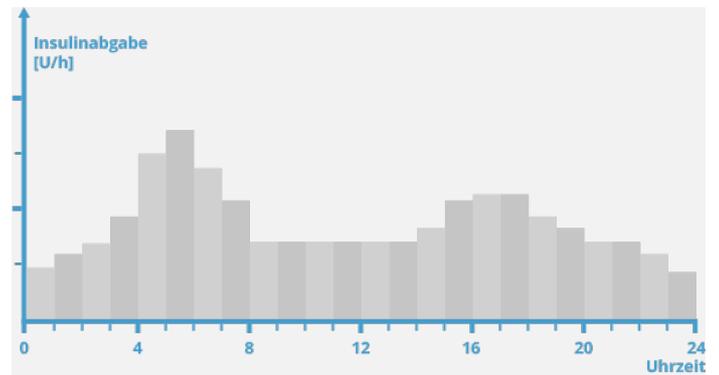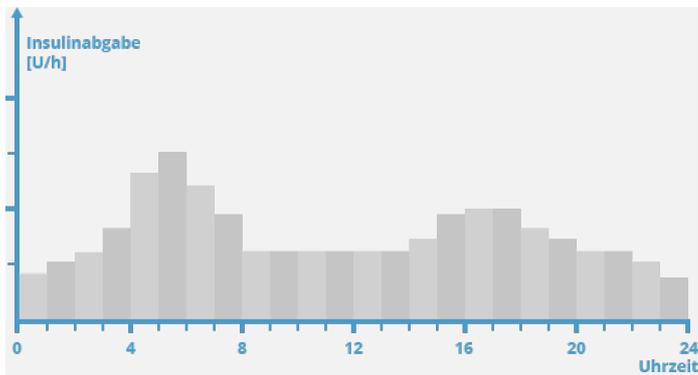

In unserem Beispiel ist der Benutzer ein Bauarbeiter, der von Montag bis Freitag von frühmorgens bis zum Arbeitsende auf den Beinen ist. Am Wochenende schläft er hingegen gerne lange und entspannt sich stundenlang beim Lesen. Nachdem er diese unterschiedlichen Tagesabläufe mit seinem Arzt besprochen hatte, programmierte er Basalratenprofil 1 für Arbeitstage. Dann programmierte er Basalratenprofil 2, das samstags und sonntags mehr Basalinsulin bereitstellt.

Programmieren eines Basalratenprofils

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot displays a main menu with a green header showing a glucose level of 5,9 mmol/L and a time of 06:55 on 29 Mär 2018. Below this, it shows a bolus of 150 U and a basal rate profile of 1,20 U/h. The right screenshot shows a status display with a purple header and a time of 07:00. It features a grid of icons for Bolus, Basalrate, Stopp, Messen, Austauschen, Einstellungen, Meine Daten, Verbinden, Flugmodus, Signaltöne, and Hilfe. At the bottom of both screenshots are buttons for Hauptmenü, Statusanzeige, and Daten hinzufügen.

01

07:00

07:00

5,9 mmol/L
06:55, 29 Mär 2018

150 U

Profil 1
1,20 U/h

Neuer Bolus +

Bolus Basalrate Stopp

Messen Austauschen Einstellungen

Meine Daten Verbinden Flugmodus

Signaltöne Hilfe

Hauptmenü Daten hinzufügen

Statusanzeige Daten hinzufügen

Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.

Tippen Sie im Hauptmenü auf Basalrate.

02

07:00

 Basalrate

 Temporäre Basalrate

 Basalratenprofile

Tippen Sie auf **Basalratenprofil**.

03

07:00


 Basalratenprofile




 Profil 1
Gesamtmenge 12,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Tippen Sie auf **+**, um ein Basalratenprofil hinzuzufügen.

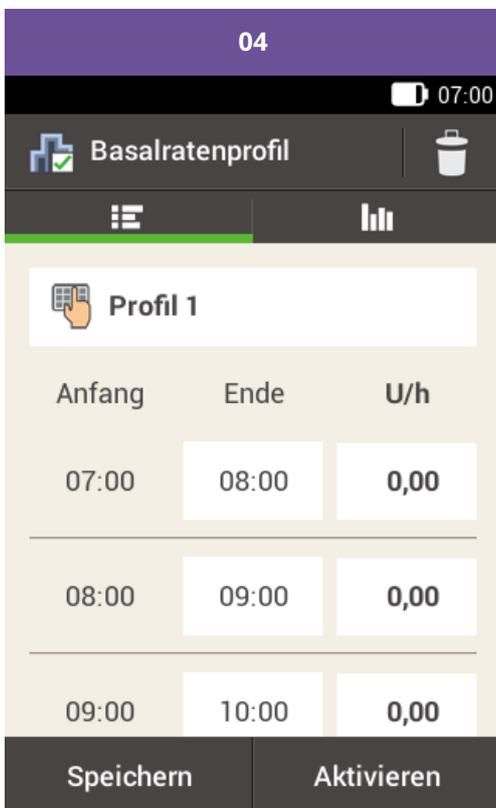

Tippen Sie auf , um dem Basalratenprofil einen Namen zu geben.

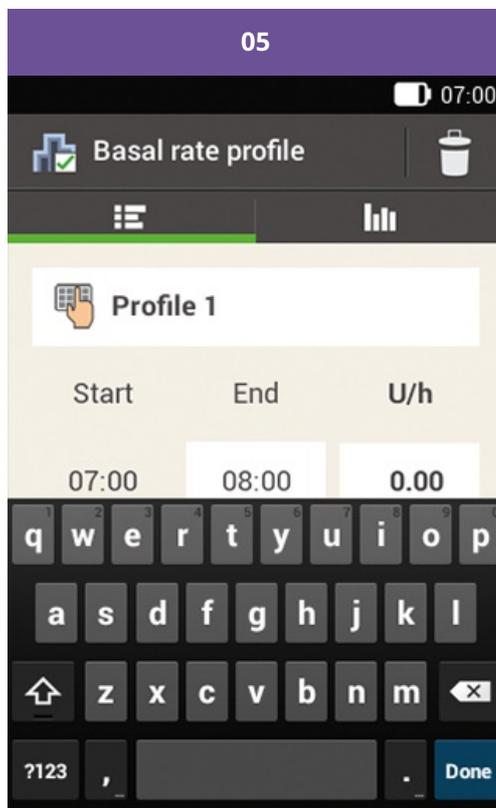

Geben Sie den gewünschten Namen für das Basalratenprofil ein. Er darf höchstens 12 Zeichen haben.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

06

Basalratenprofil

Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Speichern Aktivieren

Wählen Sie den ersten Zeitabschnitt aus.

07

Endezeit

08 : 30

Speichern

Geben Sie die Endezeit des Zeitabschnitts ein.

Tippen Sie auf Speichern.


Hinweis

Bei Zeitabschnitten für Basalratenprofile können Sie nur die Endezeit bearbeiten. Die Anfangszeit jedes Zeitabschnitts ist mit der Endezeit des vorherigen Zeitabschnitts identisch.

Um einen Zeitabschnitt zu löschen, stellen Sie die Endezeit des Zeitabschnitts so ein, dass sie mit der Anfangszeit desselben Zeitabschnitts identisch ist.

Um einen neuen Zeitabschnitt hinzuzufügen, stellen Sie die Endezeit des letzten Zeitabschnitts so ein, dass sie gleich der gewünschten Anfangszeit des neuen Zeitabschnitts ist.

Zeitabschnitte für Basalratenprofile sind nicht mit Zeitabschnitten für Bolusvorschläge identisch und werden auch nicht für diese verwendet.

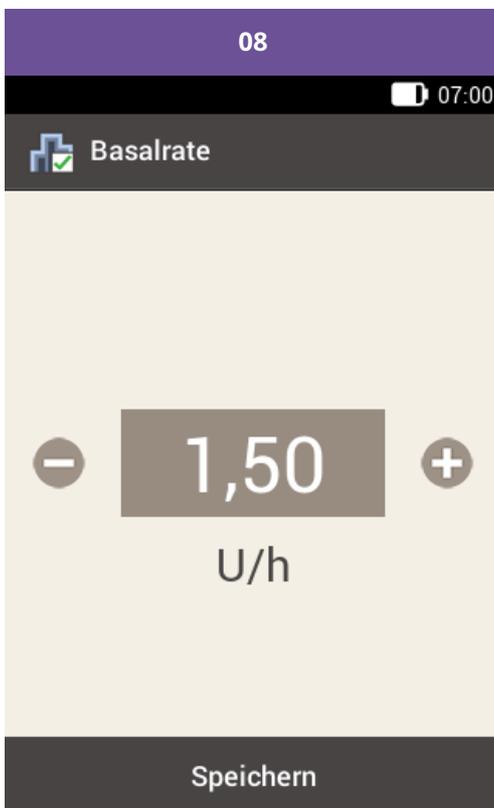


Geben Sie die Insulinmenge pro Stunde für den Zeitabschnitt ein.

Tippen Sie auf [Speichern](#).

Geben Sie dann die Endezeiten und die stündlichen Basalraten ein, bis Sie Basalraten für den gesamten Tag programmiert haben.

Wenn Sie dieses Basalratenprofil speichern, aber noch nicht aktivieren wollen, fahren Sie mit Schritt 09 fort.

Wenn Sie das neue Basalratenprofil speichern und sofort aktivieren wollen, tippen Sie auf „Aktivieren“. Fahren Sie dann mit Schritt 11 fort.

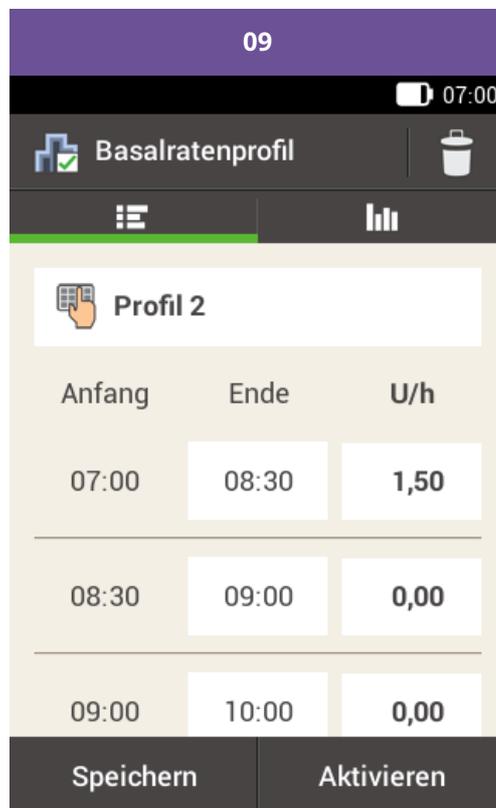

Tippen Sie auf [Speichern](#), um das programmierte Basalratenprofil zu speichern.



Basalratenprofile



Profil 1

Gesamtmenge 12,0 U

Profil 2

Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Das neu programmierte Basalratenprofil wird in der Übersicht der vorhandenen Basalratenprofile angezeigt. Kontrollieren Sie, dass die angezeigte Gesamtmenge mit der von Ihrem Arzt vorgegebenen Gesamtmenge für Basalinsulin übereinstimmt. Das Profil wird jedoch nicht automatisch aktiviert.

Im nächsten Abschnitt ist erklärt, wie Sie das Basalratenprofil aktivieren.

Aktivieren eines Basalratenprofils

Aktivieren Sie das Profil, das für einen bestimmten Zeitraum gilt. Freitag Abend, wenn das Wochenende bevorsteht, können Sie beispielsweise das Profil aufrufen, das Sie für Wochenenden programmiert haben.

01

07:00

5,9 mmol/L
06:55, 29 Mär 2018

150 U

Profil 1
1,20 U/h

Neuer Bolus +

Bolus Basalrate Stopp

Messen Austauschen Einstellungen

Meine Daten Verbinden Flugmodus

Signaltöne Hilfe

Hauptmenü Daten hinzufügen Status-anzeige Daten hinzufügen

Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.

Tippen Sie im Hauptmenü auf Basalrate.

02

07:00

 Basalrate

 Temporäre Basalrate

 Basalratenprofile

Tippen Sie auf [Basalratenprofil](#).

03

07:00

 Basalratenprofile 


 Profil 1
Gesamtmenge 12,0 U

 Profil 2
Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Das jeweils aktive Basalratenprofil erkennen Sie am Symbol .

Tippen Sie auf das Basalratenprofil, das Sie aktivieren möchten.

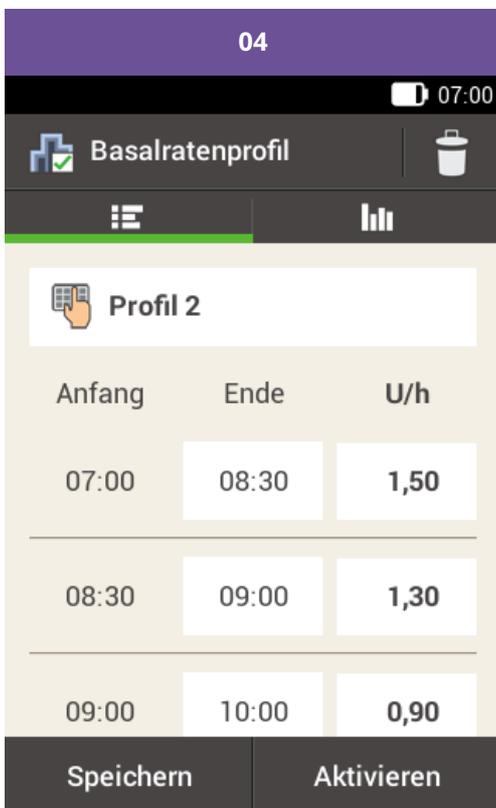

Schieben Sie die Anzeige ggf. nach oben, um alle Zeitabschnitte des Basalratenprofils zu sehen.

Tippen Sie auf , um die Grafik des Profils aufzurufen.

Tippen Sie auf [Aktivieren](#).



Zur Bestätigung drücken Sie auf die Insulintaste .

5,9 mmol/L

06:55, 08 Mär 2017



150 U

Profil 1

1,50 U/h

Neuer Bolus



Hauptmenü



Daten
hinzufügen

Das aktivierte Basalratenprofil wird
in der Statusanzeige angezeigt.

Basalratenprofil ändern

01

Basalratenprofile

Profil 1
Gesamtmenge 12,0 U

Profil 2
Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Tippen Sie auf das Basalratenprofil, das Sie ändern möchten (z. B. auf Profil 2).

Das jeweils aktive Basalratenprofil erkennen Sie am Symbol .

02

Basalratenprofil

Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Speichern Aktivieren

Tippen Sie auf eine Endezeit, um die Endezeit des Zeitabschnitts zu ändern.

Tippen Sie auf eine Basalrate, um die Basalrate des Zeitabschnitts zu ändern.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis die korrekte Basalrate für den gesamten Tag programmiert ist.

Tippen Sie auf **Speichern**.

Hinweis

Schieben Sie die Anzeige ggf. nach oben, um alle Zeitabschnitte des Basalratenprofils überprüfen zu können.



Basalratenprofile



Profil 1

Gesamtmenge 12,0 U

Profil 2

Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Das geänderte Basalratenprofil wird in der Übersicht der vorhandenen Basalratenprofile angezeigt.

Prüfen Sie, ob die angezeigte Gesamtmenge mit der von Ihrem Arzt vorgegebenen Gesamtmenge übereinstimmt.

Löschen eines Basalratenprofils

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot displays a main menu with a green header showing a glucose level of 5,9 mmol/L at 06:55 on 29 Mär 2018. Below this, it shows a bolus of 150 U and profile settings for 'Profil 1' at 1,20 U/h. The right screenshot shows a status display with a grid of icons for Bolus, Basalrate, Stopp, Messen, Austauschen, Einstellungen, Meine Daten, Verbinden, Flugmodus, Signaltöne, and Hilfe. At the bottom of both screenshots are navigation buttons: 'Hauptmenü', a lock icon, and 'Daten hinzufügen'.

01

07:00

07:00

5,9 mmol/L
06:55, 29 Mär 2018

150 U

Profil 1
1,20 U/h

Neuer Bolus +

Bolus Basalrate Stopp

Messen Austauschen Einstellungen

Meine Daten Verbinden Flugmodus

Signaltöne Hilfe

Hauptmenü Daten hinzufügen

Status-anzeige Daten hinzufügen

Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.

Tippen Sie im Hauptmenü auf Basalrate.

02

07:00

Basalrate

Temporäre Basalrate

Basalratenprofile

Tippen Sie auf [Basalratenprofil](#).

03

07:00

Basalratenprofile +


Profil 1
Gesamtmenge 10,0 U

Profil 2
Gesamtmenge 14,0 U


Profil 3
Gesamtmenge 18,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Tippen Sie auf das Basalratenprofil, das Sie löschen möchten (z. B. auf Profil 3).

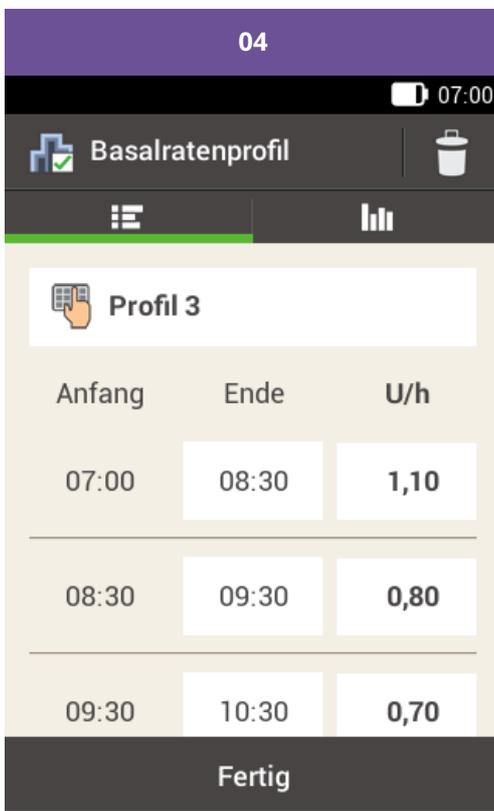

Tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke der Anzeige.

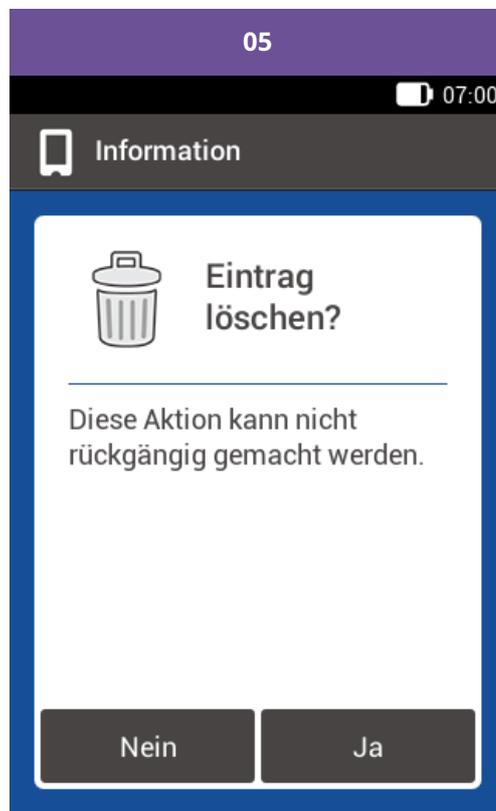

Wenn das aktive Basalratenprofil gelöscht werden soll, erscheint diese Anzeige.

Tippen Sie auf Ja.

 Basalratenprofile Profil 1
Gesamtmenge 10,0 U Profil 2
Gesamtmenge 14,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Das ausgewählte Basalratenprofil wurde aus der Liste der Basalratenprofile gelöscht.

Freigegeben / gelistet / registriert unter dem Produktnamen Accu-Chek Solo Mikropumpe.

ACCU-CHEK und ACCU-CHEK SOLO sind registrierte Marken von Roche.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch Roche erfolgt unter Lizenz.

ANDROID und GOOGLE PLAY sind registrierte Marketing von Google Inc.

® 2021 Roche Diabetes Care Austria GmbH

Roche Diabetes Care Austria GmbH
Millenium Tower, 1200 Wien, Handelskai 94-96
Insulinpumpen-Hotline: 01/277 27 - 596
www.accu-chek.at

