

# MANUALE PER LA FORMAZIONE

Sistema di microinfusione Accu-Chek® Solo





# REGOLAZIONE E AGGIUNTA DI PROFILI BASALI

## Motivazione per impostare diversi profili basali

È possibile che, in aggiunta al tuo profilo basale iniziale, possa esserti utile impostare altri profili basali per diverse routine quotidiane. Puoi impostare fino a 5 diversi profili basali. Consulta il tuo medico curante o team diabetologico in merito all'uso di diversi profili basali.

## Esempio

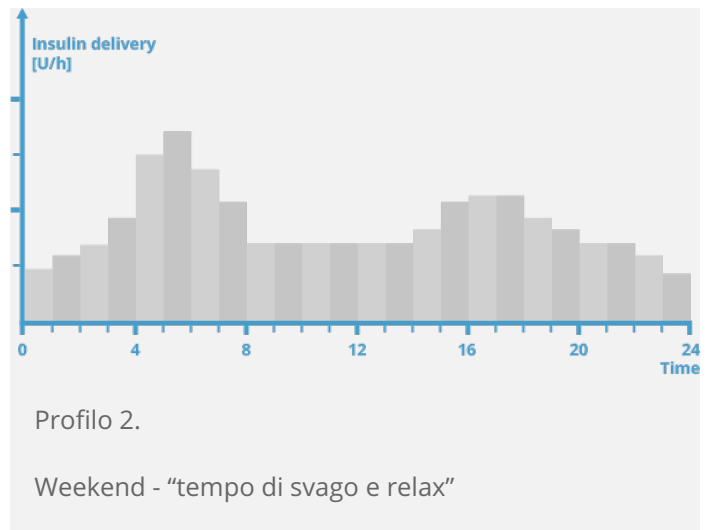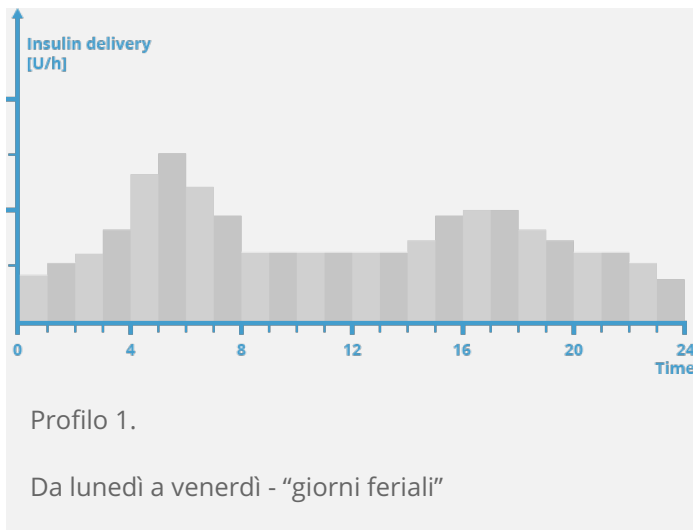

Nell'esempio illustrato, l'utente è un operaio edile, attivo dal lunedì al venerdì dalle prime ore del mattino fino alla fine del suo turno di lavoro. Durante il weekend, ama dormire fino a tardi, rilassarsi e leggere a lungo. Dopo aver discusso con il proprio medico curante le sue routine quotidiane variabili, l'utente ha impostato il Profilo 1 per i giorni feriali. Ha impostato anche il Profilo 2 che consente l'erogazione di una quantità maggiore di insulina basale di sabato e di domenica.

## Impostazione di un profilo basale

01

07:00

**5,9** mmol/L  
06:55, 29 mar 2018

**150 U**

Profilo 1  
**1,20 U/h**

Nuovo bolo +

Menu principale Aggiungi dati

07:00

Bolo Basale Stop

Glicemia Sostituzione Impostazioni



Dati Connetti Aereo


Suoni Guida

Quadro generale Aggiungi dati


Nel quadro generale tocca il profilo basale.

Nel menu principale tocca **Basale**.

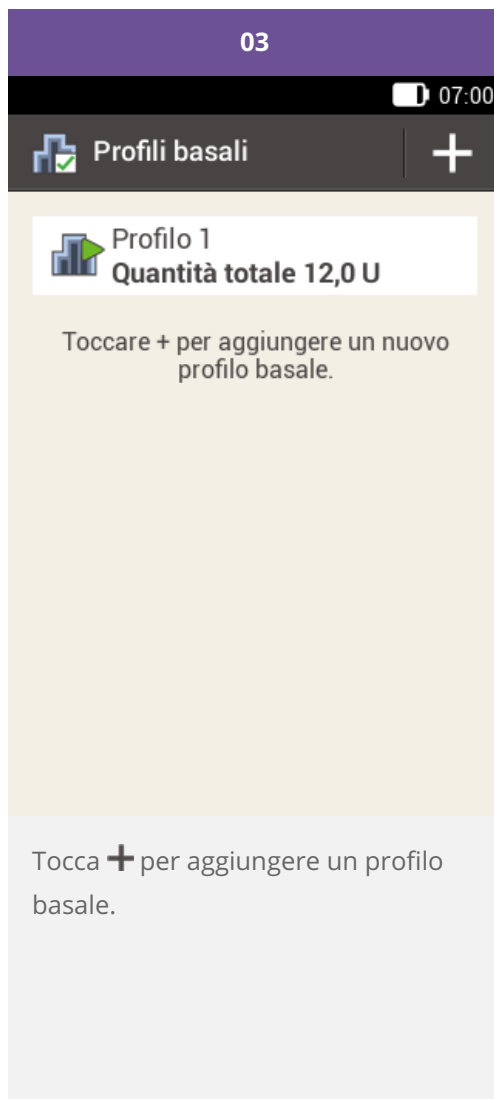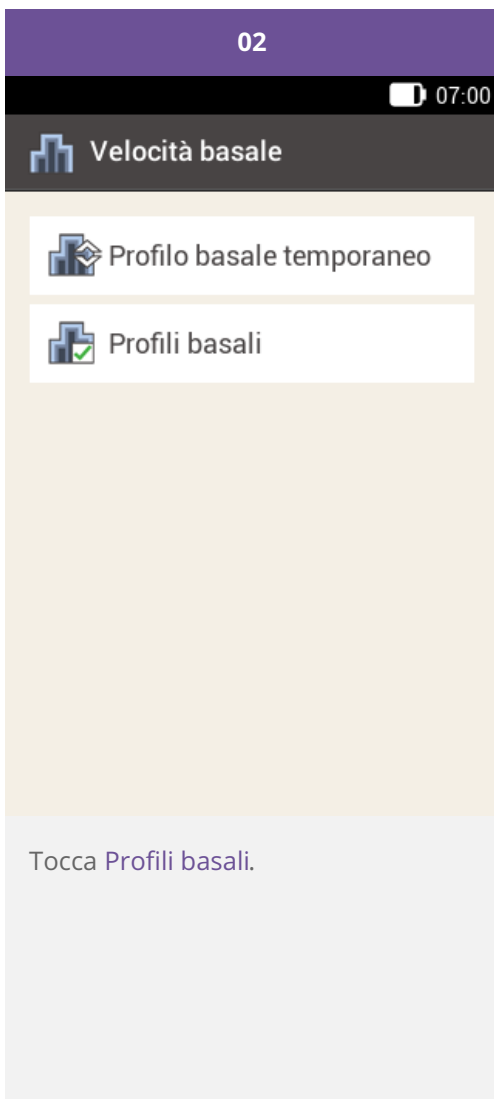

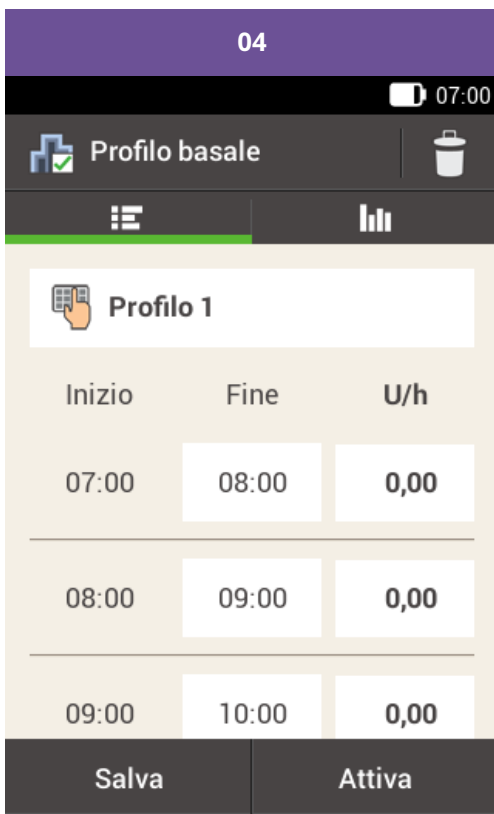

Tocca per assegnare un nome al profilo.

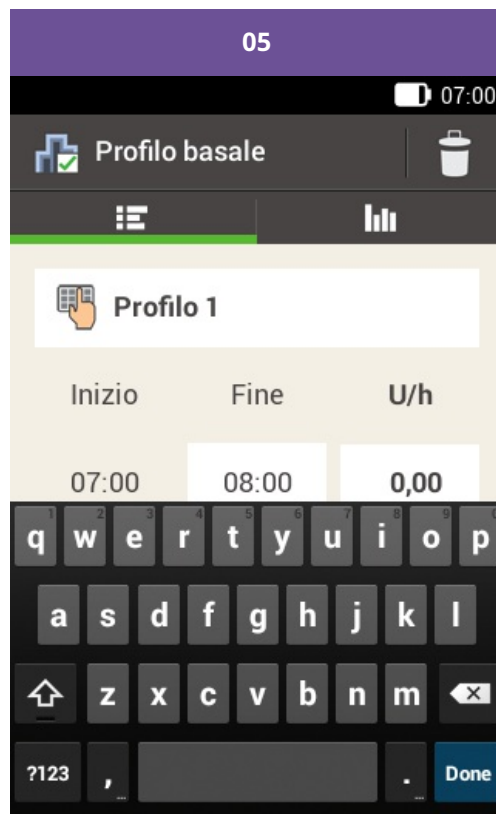

Digita il nome desiderato per il profilo basale (massimo 12 caratteri).

Poi tocca [Chiudi](#).

06

07:00

Profilo basale

Profil 2

Inizio	Fine	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Salva Attiva

Seleziona il primo periodo temporale.

07

07:00

Ora di fine

08 : 30

Salva

Inserisci l'ora di fine per il periodo temporale.

Tocca Salva.


### Nota

Puoi modificare solo l'ora di fine dei periodi temporali dei profili basali. L'ora di inizio di ogni periodo temporale corrisponde all'ora di fine del periodo temporale precedente.

Per cancellare un periodo temporale, diminuisci l'ora di fine del periodo temporale in modo che coincida con l'ora di inizio.

Per aggiungere un nuovo periodo temporale, imposta l'ora di fine dell'ultimo periodo temporale sull'ora di inizio del nuovo periodo temporale.

I periodi temporali dei profili basali non sono uguali ai periodi temporali del consiglio bolo e non vengono neppure condivisi con questa funzione.

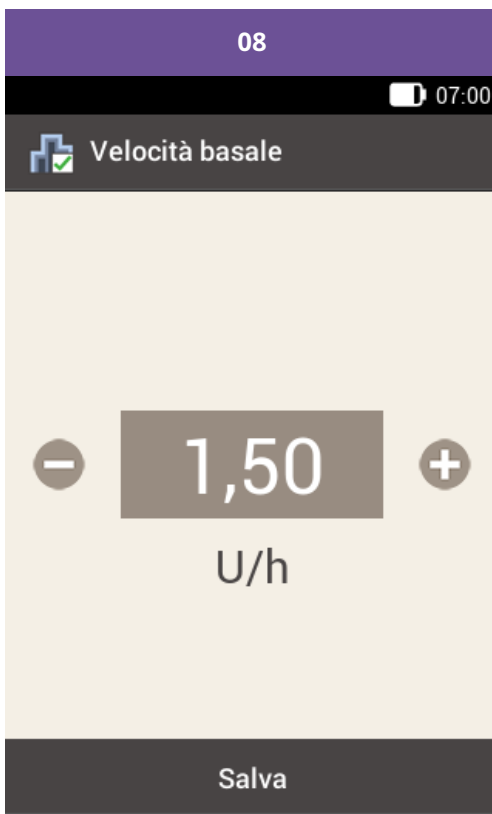


Inserisci la quantità di insulina erogata all'ora per il periodo temporale.

Tocca **Salva**.

Ripeti la procedura qui descritta per inserire l'ora di fine e la velocità basale oraria in modo da impostare le velocità basali orarie corrette per tutte le 24 ore del giorno.

Se desideri salvare, ma non attivare momentaneamente questo profilo basale, prosegui con il punto 09.

Se desideri salvare e attivare immediatamente il nuovo profilo basale, tocca "Attiva". Prosegui con il punto 11.

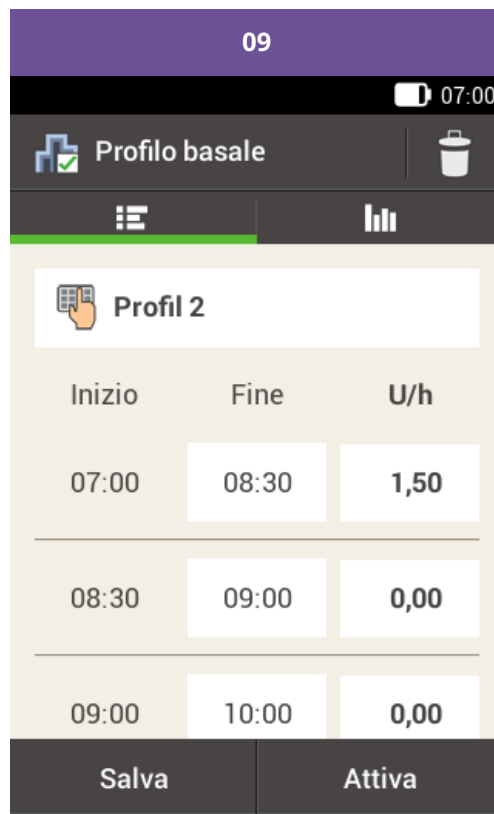

Tocca **Salva** per salvare il profilo basale impostato.



Profili basali



Profilo 1

**Quantità totale 12,0 U**

Profilo 2

**Quantità totale 16,0 U**

Toccare + per aggiungere un nuovo profilo basale.

Il nuovo profilo basale impostato appare nell'elenco dei profili basali disponibili. Accertati che la quantità totale visualizzata corrisponda alla quantità totale di insulina basale prescritta dal tuo medico curante. Il profilo basale non verrà tuttavia attivato automaticamente.

Consulta la sezione successiva su come attivare un profilo basale.



## Attivazione di un profilo basale

Tocca il profilo basale da attivare. Ad esempio, se desideri passare alla routine del weekend, tocca il profilo che hai impostato per il fine settimana per attivarlo.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface for diabetes management. The top status bar shows the time 07:00 and a battery icon. The left screenshot shows the main menu with a large green display showing a glucose reading of 5,9 mmol/L at 06:55 on 29 mar 2018. Below this, it shows a bolus of 150 U and a basal rate of 1,20 U/h for 'Profilo 1'. A 'Nuovo bolo' button with a plus sign is visible. The right screenshot shows the 'Quadro generale' (General Dashboard) with a grid of icons: Bolo (insulin bolus), Basale (basal rate), Stop, Glicemia (glucose), Sostituzione (replacement), Impostazioni (settings), Dati (data), Connetti (connect), Aereo (airplane mode), Suoni (sounds), and Guida (help). At the bottom of both screenshots are buttons for 'Menu principale' and 'Aggiungi dati'.

Nel quadro generale tocca il profilo basale.

Nel menu principale tocca Basale.

02

07:00

Velocità basale

Profilo basale temporaneo

Profili basali

Tocca Profili basali.

03

07:00

Profili basali


Profilo 1  
Quantità totale 12,0 U

Profilo 2  
Quantità totale 16,0 U


Toccare + per aggiungere un nuovo profilo basale.

Il profilo basale momentaneamente attivo è riconoscibile dal simbolo .


Tocca il profilo basale che desideri attivare.

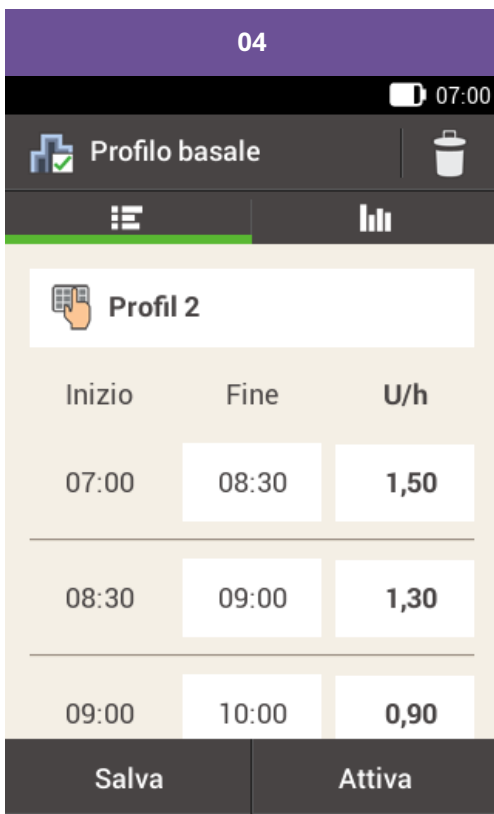


Se necessario, scorri lo schermo verso l'alto per visualizzare tutti i periodi temporali del profilo basale.


Tocca  per visualizzare il grafico del profilo.

Tocca [Attiva](#).

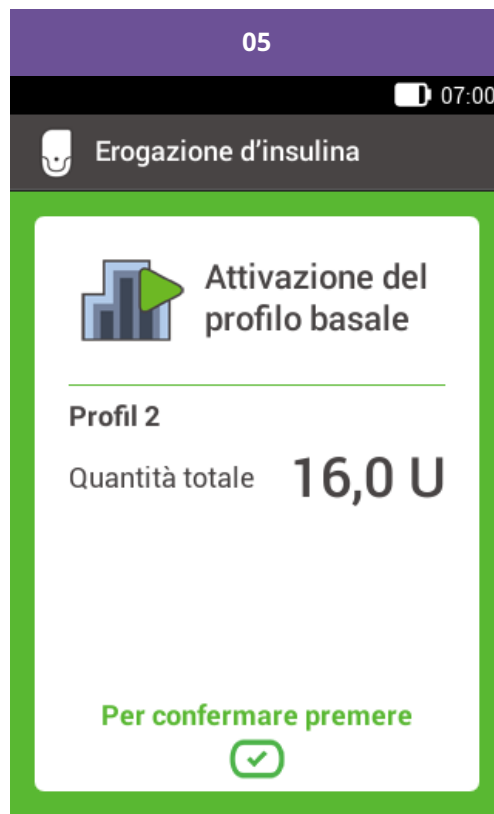

Per confermare premi il pulsante insulina .

06

 07:00

**5,9** mmol/L

06:55, 08 mar 2017



**150 U**

Profilo 1

**1,50 U/h**

Nuovo bolo



Menu  
principale



Aggiungi  
dati

Il profilo basale attivato appare nel  
quadro generale.

## Modifica di un profilo basale

01

07:00


Profili basali

Profilo 1  
Quantità totale 12,0 U

Profilo 2  
Quantità totale 16,0 U

Toccare + per aggiungere un nuovo profilo basale.

Tocca il profilo basale che desideri modificare (ad esempio Profilo 2).

Il profilo basale momentaneamente attivo è riconoscibile dal simbolo .

02

07:00

Profilo basale

Profil 2

Inizio	Fine	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Salva Attiva

Inserisci un'ora di fine per modificare l'ora di fine del periodo temporale.

Tocca una velocità basale per modificare la velocità basale del periodo temporale.

Ripeti questa procedura per impostare la velocità basale corretta per tutte le 24 ore del giorno.

Tocca **Salva**.

### Nota

Se necessario, scorri lo schermo verso l'alto per controllare tutti i periodi temporali del profilo basale.



Profili basali



Profilo 1

**Quantità totale 12,0 U**

Profilo 2

**Quantità totale 16,0 U**

Toccare + per aggiungere un nuovo profilo basale.

Il profilo basale modificato appare nell'elenco dei profili basali disponibili.

Controlla che la quantità totale visualizzata corrisponda alla quantità totale prescritta dal tuo medico curante.

## Cancellazione di un profilo basale

01

07:00

**5,9** mmol/L  
06:55, 29 mar 2018

**150 U**

Profilo 1  
**1,20 U/h**

Nuovo bolo +

Bolo Basale Stop

Glicemia Sostituzione Impostazioni

Dati Connetti Aereo


Suoni Guida

Menu principale Aggiungi dati


Quadro generale Aggiungi dati


Nel quadro generale tocca il profilo basale.


Nel menu principale tocca [Basale](#).

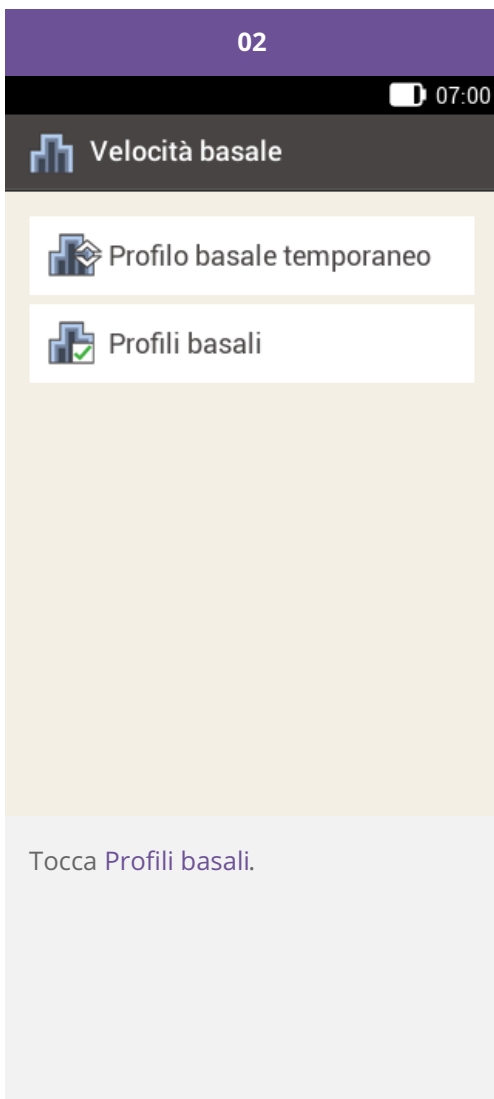



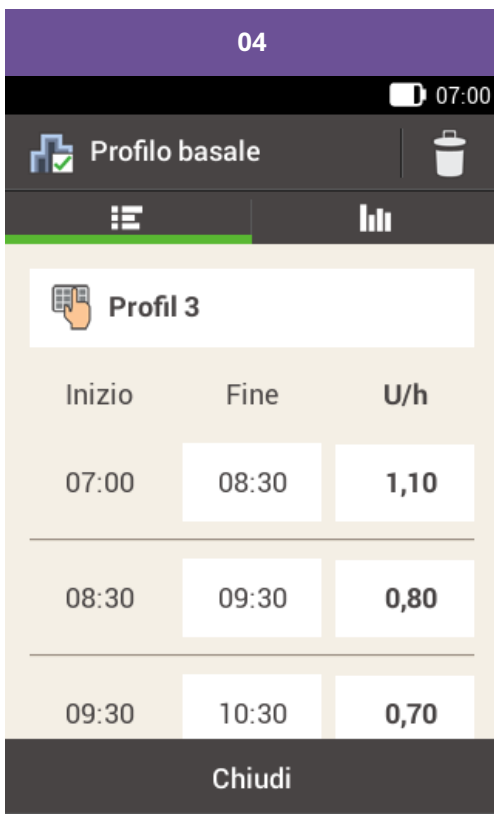

Tocca il simbolo  nell'angolo in alto a destra del display.

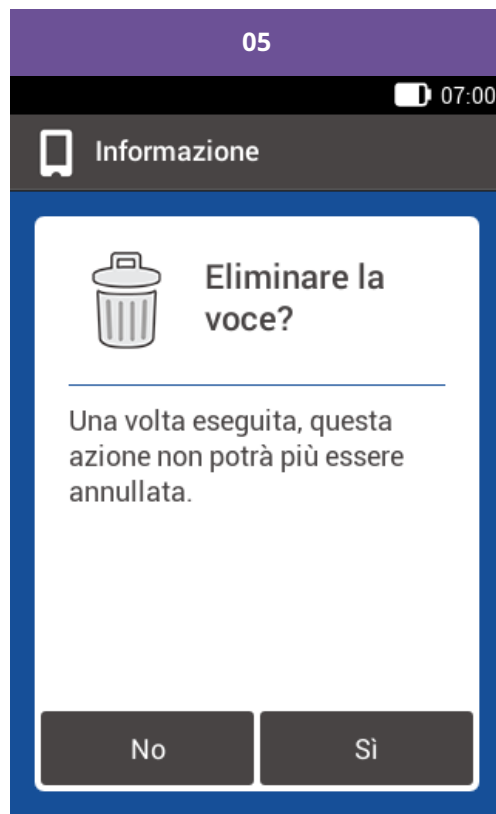

Per cancellare il profilo basale attivo appare il seguente schermo.

Tocca Sì.



Profili basali



Profilo 1

**Quantità totale 10,0 U**

Profilo 2

**Quantità totale 14,0 U**

Toccare + per aggiungere un nuovo profilo basale.

Il profilo basale selezionato è stato cancellato dall'elenco dei profili basali disponibili.

Approvato/elencato/registrato sotto il nome di prodotto:  
sistema di microinfusione Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK  
SMART PIX,  
ACCU-CHEK SOLO e FASTCLIX sono marchi di Roche.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di  
Bluetooth SIG,  
Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Roche è concesso in licenza.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi  
proprietari.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)

