

# MANUALE PER LA FORMAZIONE

Sistema di microinfusione Accu-Chek® Solo



# SCHERMO DI IMMISSIONE DATI DEL BOLO

Scopri lo schermo di immissione dati del bolo



	Nome	Descrizione
①	<b>Risultato glicemico</b>	Se non è disponibile alcun risultato glicemico, sul display vedrai tre lineette ---.
②	<b>Insulina attiva</b>	Se non è disponibile alcuna quantità d'insulina attiva, sul display vedrai tre lineette ---. Questo elemento è disponibile unicamente se è hai attivato la funzione di consiglio bolo.
③	<b>Quantità di carboidrati</b>	Se non è disponibile alcuna quantità di carboidrati, sul display vedrai tre lineette ---.
④	<b>Quantità totale</b>	Tocca questo campo per inserire la quantità totale del bolo. La quantità totale è la somma del bolo di correzione e del bolo pasto.
⑤	<b>Bolo di correzione</b>	Tocca questo campo per inserire la quantità di insulina necessaria per correggere livelli glicemici che non rientrano nell'intervallo glicemico ideale.  Il bolo di correzione può essere negativo se il valore glicemico è inferiore al valore ideale. In questo caso, il bolo viene sottratto dal bolo pasto in corso.
⑥	<b>Bolo pasto</b>	Tocca questo campo per inserire la quantità di insulina per compensare il cibo assunto.
⑦	<b>Tipo di bolo</b>	Tocca questo elemento per selezionare uno dei seguenti tipi di bolo: bolo standard, bolo prolungato, bolo multiwave, bolo rapido, bolo per penna/siringa.

Le informazioni riguardanti la quantità di carboidrati (③) appaiono sul display dello strumento di gestione del diabete solo se le hai inserite nello schermo Dettagli del risultato.

### **Nota**

Quando lo schermo Immissione dati sul bolo appare per la prima volta, non è indicata alcuna quantità del bolo. Occorre quindi inserire la quantità del bolo.

Se inserisci la quantità del bolo di correzione o del bolo pasto per prima, il campo della quantità totale del bolo è disattivato e non puoi modificarlo. Tuttavia, il valore si adatta di conseguenza.

Se inserisci la quantità totale per prima, tutta l'insulina viene impostata come bolo di correzione. I campi di inserimento del bolo di correzione e del bolo pasto sono disattivati.

Ti consigliamo, pertanto, di iniziare inserendo il bolo di correzione e il bolo pasto separatamente. Se non hai configurato la funzione di consiglio bolo, la distinzione tra bolo di correzione e bolo pasto influenza principalmente i tipi di bolo utilizzabili. Il consiglio bolo, invece, può aiutarti a controllare meglio i valori glicemici elevati dopo i pasti.

# BOLO STANDARD

## Descrizione del bolo standard


Con il bolo standard, la quantità d'insulina impostata viene erogata tutta in una volta, esattamente come in un'iniezione. Questo bolo può essere utile se assumi alimenti contenenti carboidrati ad assorbimento rapido, ad esempio pane o dolci da forno. Il bolo standard è anche il tipo di bolo adatto per correggere livelli glicemici elevati.

## Programmazione di un bolo

		
<p><b>Quadro generale &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 1:</b></p> <p>Tocca <b>Nuovo bolo</b> o <b>+</b> nel quadro generale.</p> <p>Prosegui con il punto 2.</p>	<p><b>Menu principale &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 2:</b></p> <p>Tocca il menu <b>Bolo</b> nel menu principale.</p> <p>Prosegui con il punto 2.</p>	<p><b>Risultato glicemico &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 3:</b></p> <p>Dopo aver misurato la glicemia: Nello schermo <b>Dettagli del risultato</b> tocca <b>Bolo</b>.</p> <p>Prosegui con il punto 3.</p>

 **Nota**

Se hai già configurato la funzione di consiglio bolo, toccando "Bolo" nell'opzione 3 accedi direttamente allo schermo del risultato del consiglio bolo. (Per maggiori informazioni sulla funzione di consiglio bolo consulta [\(Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo\) Capitolo 9.1](#)).

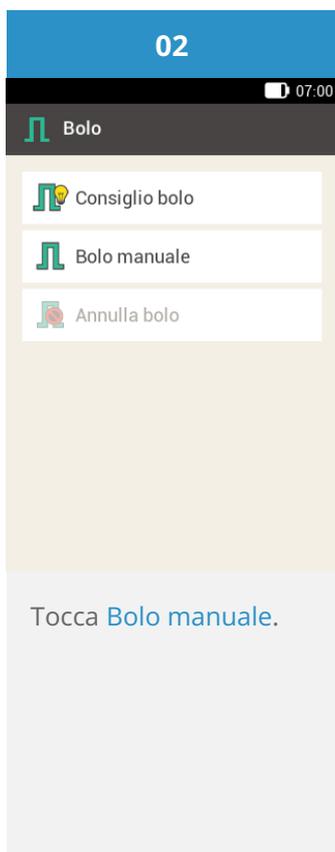

## Inserimento del bolo

03	04	05
<p data-bbox="288 141 622 168">07:00</p> <p data-bbox="288 168 622 212">Immissione dati sul bolo</p> <div data-bbox="288 224 622 560"> <p data-bbox="288 224 622 291">--- mg/dL --- U 0,00 U</p> <p data-bbox="288 291 622 358">Carboidrati --- g 0,00 U</p> <p data-bbox="288 380 622 448">Quantità totale 0,00 U</p> <p data-bbox="288 470 622 515">Tipo <b>Standard</b></p> <p data-bbox="288 515 622 560">Eventi salute inclusi: 0 %</p> </div>	<p data-bbox="622 141 956 168">07:00</p> <p data-bbox="622 168 956 212">Quantità d'insulina per correggere la glicemia</p> <div data-bbox="622 224 956 560"> <p data-bbox="622 224 956 560">- 1,40 + U</p> </div>	<p data-bbox="956 141 1289 168">07:00</p> <p data-bbox="956 168 1289 212">Quantità d'insulina per coprire un pasto</p> <div data-bbox="956 224 1289 560"> <p data-bbox="956 224 1289 560">- 5,00 + U</p> </div>
Bolo	OK	OK
<p data-bbox="288 638 622 1012">Tocca il campo di inserimento adatto alla tua situazione: inserisci il bolo di correzione, il bolo pasto oppure la quantità totale del bolo.</p>	<p data-bbox="622 638 956 1012">Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità d'insulina desiderata del bolo di correzione. Tocca <a href="#">Salva</a>.</p>	<p data-bbox="956 638 1289 1012">Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità d'insulina desiderata del bolo pasto. Tocca <a href="#">Salva</a>.</p>

06	07	08
<p data-bbox="304 174 552 208">Immissione dati sul bolo</p> <p data-bbox="304 230 603 297">--- mg/dL --- U 1,40 U</p> <p data-bbox="304 320 603 365">Carboidrati --- g 5,00 U</p> <p data-bbox="304 409 603 454">Quantità totale 6,40 u</p> <p data-bbox="304 477 603 521">Tipo  Standard</p> <p data-bbox="432 600 475 622">Bolo</p>	<p data-bbox="639 174 863 208">Erogazione d'insulina</p> <p data-bbox="671 253 895 331"> Erogazione di un bolo standard</p> <p data-bbox="659 387 914 432">Quantità totale 6,40 U</p> <p data-bbox="683 555 898 611">Per confermare premere </p>	<p data-bbox="975 174 1190 253">162 mg/dL</p> <p data-bbox="975 253 1134 275">06:55, 29 mar 2018</p> <p data-bbox="975 297 1114 331"> 195 U</p> <p data-bbox="975 365 1082 387">Profilo 1</p> <p data-bbox="975 387 1082 421">1,20 U/h</p> <p data-bbox="975 432 1090 454">Bolo standard</p> <p data-bbox="975 454 1054 488">1,60 U</p> <p data-bbox="975 521 1070 544">Nuovo bolo </p> <p data-bbox="975 589 1054 633">Menu principale  Aggiungi dati</p>
<p data-bbox="304 667 451 701">Tocca <a href="#">Bolo</a>.</p>	<p data-bbox="639 667 914 992">Questo schermo ti mostra i dettagli del bolo. Controlla che siano corretti, poi premi il pulsante insulina per erogare il bolo.</p>	<p data-bbox="975 667 1249 1037">Il microinfusore eroga il bolo standard. Il display visualizza lo schermo generale con una barra di progressione che indica come procede l'erogazione del bolo.</p>


## BOLO PROLUNGATO

### Descrizione del bolo prolungato

Nelle situazioni in cui il tuo bolo di insulina non deve essere erogato tutto in una volta, ma in un arco di tempo predefinito, puoi utilizzare un bolo prolungato. Il bolo prolungato è una funzione speciale dei microinfusori per insulina che consente di erogare la quantità di un bolo d'insulina in un arco di tempo predefinito. Questo tipo di bolo è utile soprattutto in caso di pasti lenti da digerire, ad es. con forte contenuto di carboidrati complessi, grassi o proteine. Il bolo prolungato si usa anche in caso di pasti assunti nell'arco di alcune ore (ad es. pranzi di matrimonio). L'arco di tempo di erogazione del bolo è regolabile a intervalli di 15 minuti fino ad un tempo massimo di 24 ore. L'erogazione comincia subito dopo che hai confermato il bolo. Per tutto il tempo di erogazione del bolo, il quadro generale mostra il tempo restante e la quantità d'insulina rimanente del bolo prolungato. Puoi aggiungere un bolo standard o un bolo rapido ad un bolo prolungato in corso e un ulteriore bolo prolungato o bolo multiwave.

#### Nota

Puoi utilizzare un bolo prolungato unicamente per definire la quantità di insulina necessaria per coprire i carboidrati assunti e non l'insulina per correggere il livello glicemico. Non cominciare quindi l'impostazione definendo la quantità totale del bolo.

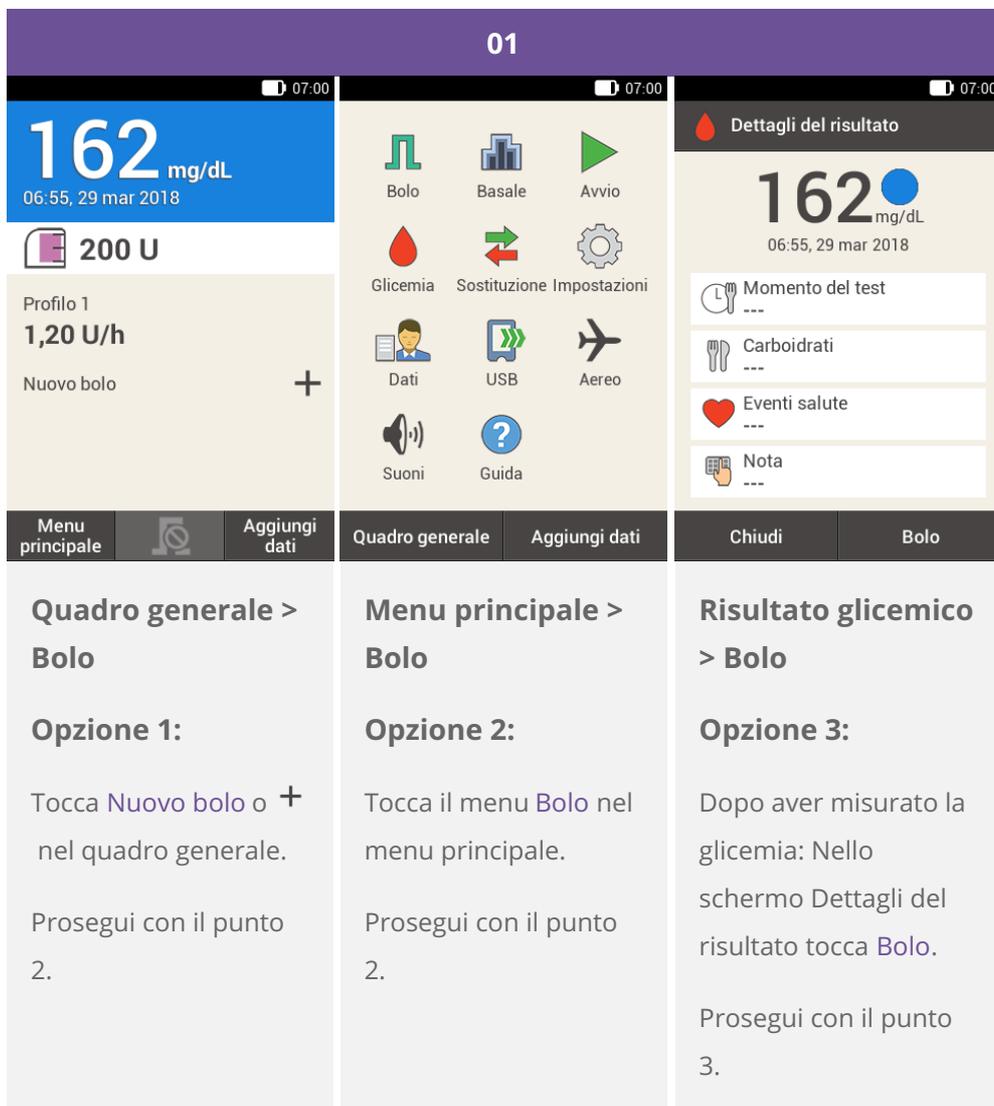

### **Nota**

Se hai già configurato la funzione di consiglio bolo, toccando "Bolo" nell'opzione 3 accedi direttamente allo schermo del risultato del consiglio bolo. (Per maggiori informazioni sulla funzione di consiglio bolo consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.1).


02	03
<p data-bbox="288 141 620 174">Bolo 07:00</p> <ul data-bbox="288 174 620 405" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="288 174 620 230">Consiglio bolo</li> <li data-bbox="288 230 620 286">Bolo manuale</li> <li data-bbox="288 286 620 405">Annulla bolo</li> </ul>	<p data-bbox="624 141 954 174">Immissione dati sul bolo 07:00</p> <p data-bbox="624 174 954 230">--- mg/dL } 0,00 U --- U }</p> <p data-bbox="624 230 954 286">Carboidrati } 0,00 U --- g }</p> <p data-bbox="624 286 954 405">Quantità totale 0,00 u</p> <p data-bbox="624 405 954 483">Tipo <b>Standard</b></p> <p data-bbox="624 483 954 584">Eventi salute inclusi: 0 %</p> <p data-bbox="624 584 954 633">Bolo</p>
<p data-bbox="288 638 620 918">Tocca <b>Bolo manuale</b>.</p>	<p data-bbox="624 638 954 918">Tocca il campo di inserimento adatto alla tua situazione: inserisci il bolo pasto.</p>

**i Nota**

Non puoi erogare un bolo di correzione in un dato arco di tempo. Non inserire quindi l'insulina nel campo del bolo di correzione o della quantità totale del bolo. Se necessiti di un bolo di correzione, utilizza piuttosto il bolo standard o il bolo multiwave.

04	05	06
<p>Quantità d'insulina per coprire un pasto</p> <p>5,00 U</p> <p>OK</p>	<p>Immissione dati sul bolo</p> <p>0,00 U</p> <p>6,40 U</p> <p>Quantità totale 6,40 U</p> <p>Tipo Standard</p> <p>Bolo</p>	<p>Tipo di bolo</p> <p>Bolo standard</p> <p><b>Bolo prolungato</b></p> <p>Bolo multiwave</p> <p>Bolo rapido</p> <p>Penna / siringa</p> <p>OK</p>
<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità d'insulina desiderata del bolo pasto.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Tocca <b>Tipo</b>.</p>	<p>Tocca <b>Bolo prolungato</b>.</p> <p>Poi tocca <b>Salva</b>.</p>

07	08	09
<p>Bolo prolungato</p> <p>Quantità totale 6,40 U</p> <p>Arco di tempo 0 h 00 m</p> <p>Bolo</p>	<p>Arco di tempo</p> <p>02 ore</p> <p>15 minuti</p> <p>Salva</p>	<p>Bolo prolungato</p> <p>Quantità totale 6,40 U</p> <p>Arco di tempo 2 h 15 m</p> <p>Bolo</p>
<p>Tocca <b>Arco di tempo</b>.</p>	<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare le ore e i minuti per l'arco di tempo del bolo prolungato.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Tocca <b>Bolo</b>.</p>

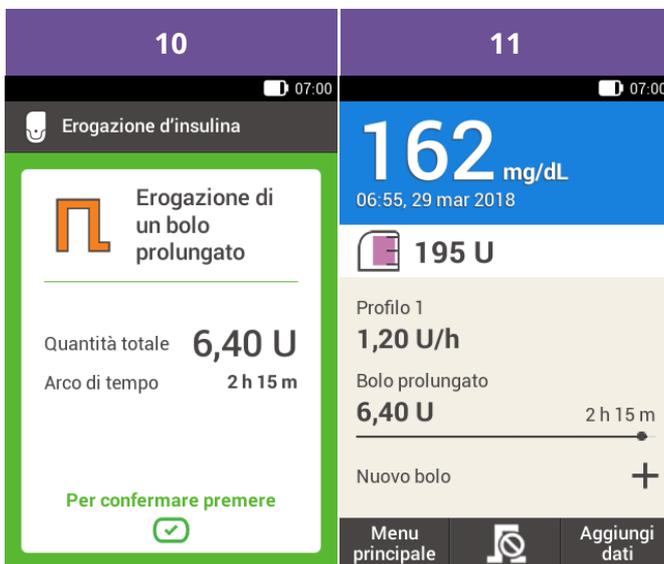

Questo schermo ti mostra i dettagli del bolo. Controlla che siano corretti, poi premi il pulsante insulina per erogare il bolo.

Il microinfusore eroga il bolo prolungato. Il display visualizza lo schermo generale con una barra di progressione che indica come procede l'erogazione del bolo e il tempo restante fino alla completa erogazione.

# BOLO MULTIWAVE

## Descrizione del bolo multiwave

Il bolo multiwave è un'altra funzione esclusiva dei microinfusori per insulina che unisce un bolo standard e un bolo prolungato: una parte della quantità del bolo viene erogata immediatamente, mentre l'altra parte viene erogata in un arco di tempo predefinito. Questo tipo di bolo è utile in caso di pasti ricchi di carboidrati ad assorbimento sia rapido che lento e di grassi e proteine oppure di pasti abbondanti con più portate. Puoi utilizzare questo tipo di bolo quando intendi assumere carboidrati ad assorbimento lento, ma hai un livello glicemico elevato prima del pasto. Puoi programmare quindi la parte immediata del bolo per correggere il livello glicemico e la parte prolungata per l'assunzione dei carboidrati. L'arco di tempo di erogazione della quantità prolungata del bolo è regolabile a intervalli di 15 minuti fino ad un tempo massimo di 24 ore e comincia subito dopo aver confermato il bolo. Puoi aggiungere un bolo standard o un bolo rapido ad un bolo multiwave in corso e un ulteriore bolo prolungato o bolo multiwave.

01		
<p>162 mg/dL 06:55, 29 mar 2018</p> <p>200 U</p> <p>Profilo 1 1,20 U/h</p> <p>Nuovo bolo +</p>	<p>Bolo Basale Avvio</p> <p>Glicemia Sostituzione Impostazioni</p> <p>Dati USB Aereo</p> <p>Suoni Guida</p>	<p>Dettagli del risultato</p> <p>162 mg/dL 06:55, 29 mar 2018</p> <p>Momento del test ---</p> <p>Carboidrati ---</p> <p>Eventi salute ---</p> <p>Nota ---</p>
<p>Menu principale</p> <p>Aggiungi dati</p>	<p>Quadro generale</p> <p>Aggiungi dati</p>	<p>Chiudi</p> <p>Bolo</p>
<p><b>Quadro generale &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 1:</b></p> <p>Tocca <b>Nuovo bolo</b> o + nel quadro generale.</p> <p>Prosegui con il punto 2.</p>	<p><b>Menu principale &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 2:</b></p> <p>Tocca il menu <b>Bolo</b> nel menu principale.</p> <p>Prosegui con il punto 2.</p>	<p><b>Risultato glicemico &gt; Bolo</b></p> <p><b>Opzione 3:</b></p> <p>Dopo aver misurato la glicemia: Nello schermo <b>Dettagli del risultato</b> tocca <b>Bolo</b>.</p> <p>Prosegui con il punto 3.</p>

Se hai già configurato la funzione di consiglio bolo, toccando "Bolo" nell'opzione 3 accedi direttamente allo schermo del risultato del consiglio bolo. (Per maggiori informazioni sulla funzione di consiglio bolo consulta (Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo) Capitolo 9.1).


<p><b>02</b></p> <p>Bolo 07:00</p> <p>Bolo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Consiglio bolo</li><li>Bolo manuale</li><li>Annulla bolo</li></ul> <p>Tocca Bolo manuale.</p>	<p><b>iNota</b></p> <p>Puoi impostare un bolo multiwave soltanto se hai programmato un bolo pasto. Non cominciare quindi dall'impostazione della quantità totale del bolo.</p>	<p><b>03</b></p> <p>Immissione dati sul bolo 07:00</p> <p>--- mg/dL } <b>0,00 U</b></p> <p>--- U }</p> <p>Carboidrati } <b>0,00 U</b></p> <p>--- g }</p> <hr/> <p>Quantità totale <b>0,00 u</b></p> <p>Tipo <b>Standard</b></p> <p>Eventi salute inclusi: 0 %</p> <p>Bolo</p> <p>Tocca il campo di inserimento adatto alla tua situazione: inserisci il bolo di correzione oppure il bolo pasto.</p>
--	--	--

04	05	06
<p>Quantità d'insulina per coprire un pasto</p> <p>5,00 U</p> <p>OK</p>	<p>Quantità d'insulina per correggere la glicemia</p> <p>1,40 U</p> <p>OK</p>	<p>Immissione dati sul bolo</p> <p>1,40 U</p> <p>5,00 U</p> <p>Quantità totale 6,40 U</p> <p>Tipo Standard</p> <p>Bolo</p>
<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità d'insulina desiderata del bolo pasto.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità d'insulina desiderata del bolo di correzione.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Tocca <b>Tipo</b>.</p>

07	08	09
<p>Tipo di bolo</p> <p><input type="radio"/> Bolo standard</p> <p><input type="radio"/> Bolo prolungato</p> <p><input checked="" type="radio"/> Bolo multiwave</p> <p><input type="radio"/> Bolo rapido</p> <p><input type="radio"/> Penna / siringa</p> <p>OK</p>	<p>Bolo multiwave</p> <p>Quantità totale 6,40 U</p> <p>Quantità immediata 1,40 U</p> <p>Quantità prolungata 5,00 U</p> <p>Arco di tempo 2 h 00 m</p> <p>Bolo</p>	<p>Quantità immediata</p> <p>3,00 U</p> <p>OK</p>
<p>Tocca <b>Bolo multiwave</b>.</p> <p>Poi tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Tocca <b>Quantità immediata</b> o <b>Quantità prolungata</b>.</p>	<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare la quantità immediata o la quantità prolungata.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>

## **Nota**

Poiché la **Quantità totale** rimane la stessa, non ha importanza se imposti la **Quantità prolungata** o la **Quantità immediata**, in quanto l'altra verrà calcolata di conseguenza. Non puoi impostare una quantità immediata inferiore al bolo di correzione.

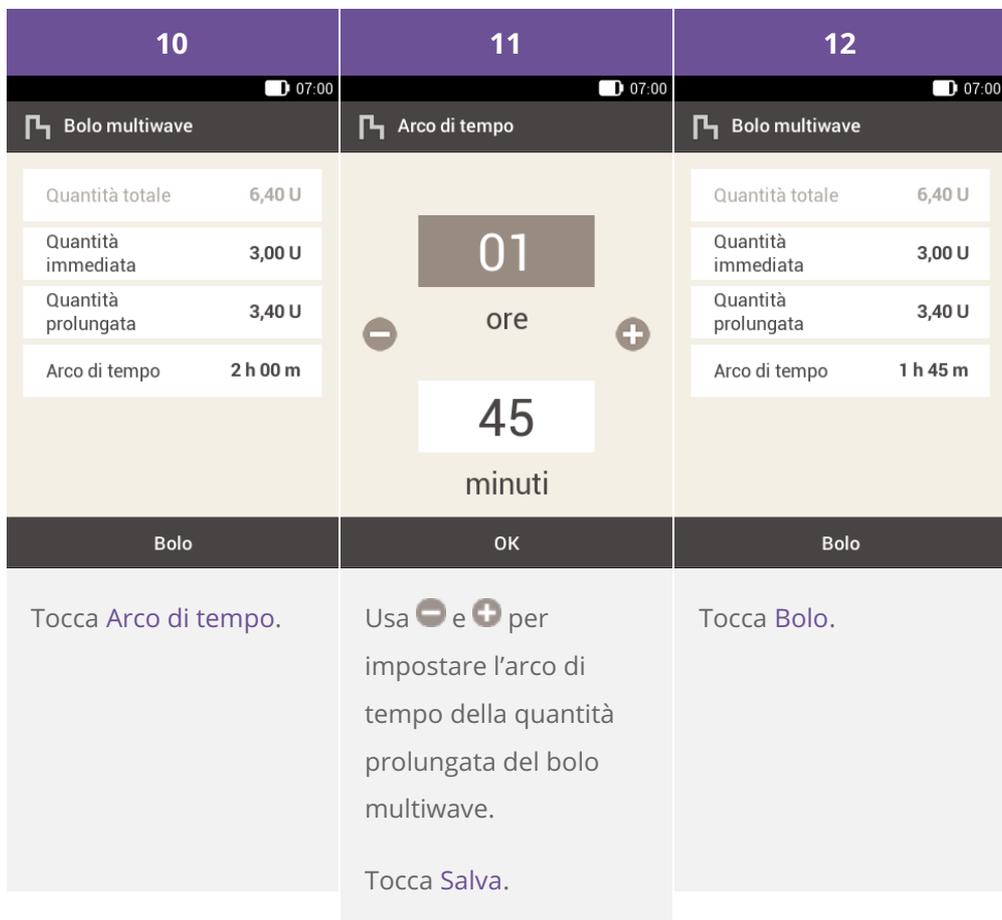



Questo schermo ti mostra i dettagli del bolo. Controlla che siano corretti, poi premi il pulsante insulina per erogare il bolo.

Il microinfusore eroga il bolo multiwave. Il display visualizza lo schermo generale con una barra di progressione che indica come procede l'erogazione del bolo e il tempo restante fino alla completa erogazione.

## BOLO RAPIDO

Descrizione del bolo rapido



## BOLO RAPIDO



### UN BOLO

impostato utilizzando i pulsanti sul microinfusore

## PERCHÈ E QUANDO È NECESSARIO



Carboidrati a digestione  
**RAPIDA**



Livello glicemico  
**ELEVATO**



**OPPURE**



## **MODALITÀ AEREO**

attivata sullo strumento

## **NON DISPONIBILE**

o comunicazione impossibile

### Nota

#### **0,2 UNITÀ**

impostazione di base  
per l'incremento del  
bolo rapido




se necessario cambia  
il bolo rapido in

**0,5 UNITÀ**

**1,0 UNITÀ**

**2,0 UNITÀ**

## **COSA FARE**

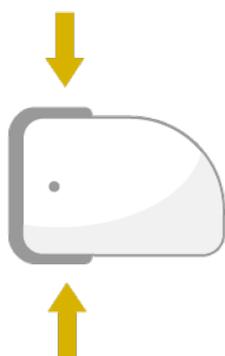

### **PER ATTIVARE**

premi 3 s fino al beep



-----

**1**

2

## PER DOSARE

la quantità d'insulina premi contemporaneamente entrambi i pulsanti bolo rapido  
1 pressione = 1 quantità di incremento d'insulina

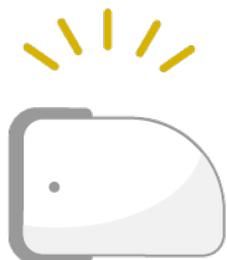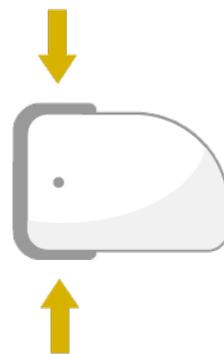

## CONFERMA


1 beep = 1 quantità di incremento d'insulina

3

4

## PER EROGARE

l'insulina premi di nuovo entrambi i pulsanti bolo rapido fino al beep

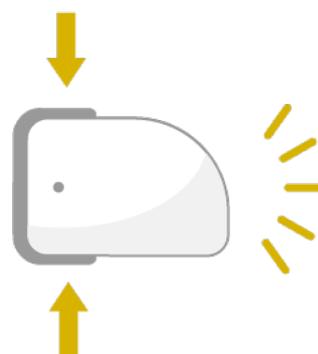

✓ **COMINCIA L'EROGAZIONE DEL BOLO RAPIDO**


### **Avvertenza**

Accertati di conoscere e di utilizzare l'incremento del bolo rapido corretto e adatto al tuo personale fabbisogno insulinico. L'uso di un incremento del bolo errato comporta errori di erogazione d'insulina.

## **i Nota**

Se utilizzi il bolo rapido per coprire i carboidrati, ricordati che devi successivamente modificare il bolo pasto nel diario per ottenere un calcolo ottimale del consiglio bolo. Per maggiori informazioni consulta ([Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo](#)) [Capitolo 9.9](#).

## **Uso del bolo rapido**

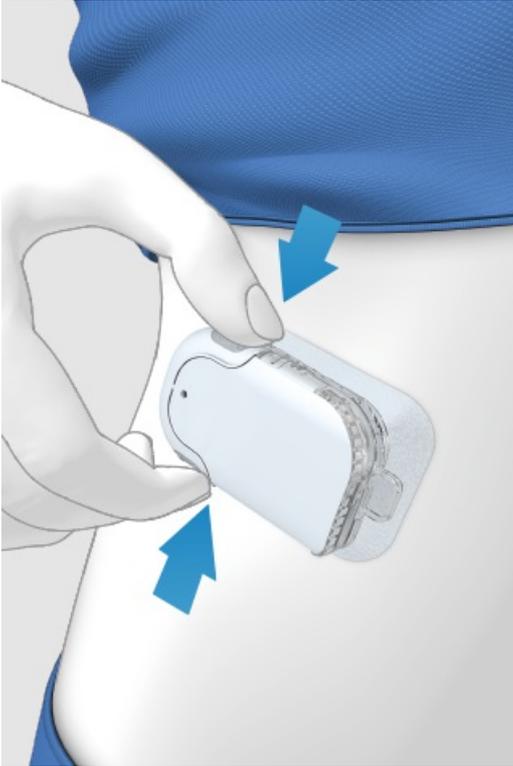

- 1 Premi e tieni premuti i due pulsanti bolo rapido per 3 secondi fino al beep.
- 2 Dopo il beep, premi simultaneamente entrambi i pulsanti bolo rapido, una volta per ciascun incremento, fino a raggiungere la quantità d'insulina desiderata.
- 3 3 secondi dopo l'ultima pressione dei pulsanti, il microinfusore conferma il numero di pressioni con un beep per ciascun incremento e, quindi, la quantità di insulina impostata.
- 4 Se la quantità di insulina è corretta, premi nuovamente entrambi i pulsanti bolo rapido per erogare il bolo rapido. Il microinfusore conferma l'avvio dell'erogazione del bolo con un suono.

 **Nota**

Se non confermi il bolo rapido premendo i pulsanti bolo rapido entro 5 secondi, il bolo rapido impostato viene annullato e viene emesso un suono corrispondente.

## ANNULLAMENTO DI UN BOLO

### Annullamento di un bolo utilizzando il menu “Annullamento di un bolo”

Hai due opzioni per annullare un bolo con lo strumento di gestione del diabete:

Nel quadro generale o nel menu principale puoi annullare un bolo toccando il simbolo .

Nel menu Annullamento di un bolo puoi annullare boli singoli oppure tutti i boli.

### Annullamento di un bolo durante l'impostazione

**Bolo standard, bolo prolungato e bolo multiwave**

Durante l'impostazione tocca  per tornare all'operazione precedente e inserire un nuovo valore.

#### **Bolo rapido**

Se non confermi il bolo rapido premendo i pulsanti bolo rapido entro 5 secondi, il bolo rapido impostato viene annullato.

### Interruzione dell'erogazione del bolo in mancanza dello strumento di gestione del diabete


Se non hai a disposizione lo strumento di gestione del diabete e desideri interrompere l'erogazione del bolo, rimuovi il microinfusore dal relativo supporto mentre è in corso l'erogazione del bolo. Successivamente, ricollega il microinfusore al relativo supporto.

## Annullamento di tutti i boli

01	02	03
		
<p>Nel quadro generale o nel menu principale tocca .</p>	<p>Se desideri annullare tutti i boli in corso, tocca <a href="#">Annulla tutti i boli</a>.</p>	<p>Tocca <a href="#">Sì</a> se desideri annullare tutti i boli.</p>

04	05
	
<p>Tocca <a href="#">OK</a> per confermare.</p>	<p>Tutti i boli sono stati annullati e cancellati dal quadro generale.</p>

## Annullamento di boli singoli

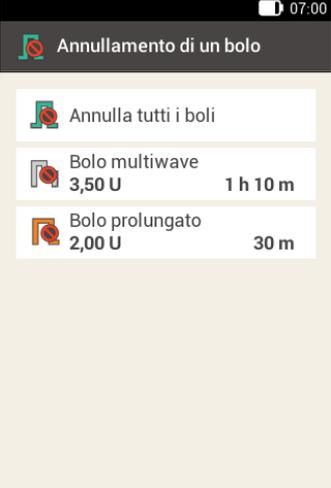01	02	03
 <p>06:55, 29 mar 2018</p> <p><b>162</b> mg/dL</p> <p>192 U</p> <p>Profilo 1 <b>0,70 U/h</b></p> <p>Bolo multiwave <b>3,50 U</b> 1 h 10 m</p> <p>Bolo prolungato <b>2,00 U</b> 30 m</p> <p>Menu principale  Aggiungi dati</p>	 <p>Annullamento di un bolo</p> <p>Annulla tutti i boli</p> <p>Bolo multiwave 3,50 U 1 h 10 m</p> <p>Bolo prolungato 2,00 U 30 m</p>	 <p>Informazione</p> <p>Annullare il bolo multiwave?</p> <p>Nome</p> <p>Qtà erogata 1,50 U</p> <p>Qtà restante 3,50 U</p> <p>Tempo restante 1 h 10 m</p> <p>No Sì</p>
<p>Nel quadro generale o nel menu principale tocca .</p>	<p>Tocca il bolo che desideri annullare.</p>	<p>Tocca <b>Sì</b> se desideri annullare il bolo.</p>

### Nota

L'erogazione del bolo continua finché non confermi toccando Sì.

04	05
<p>Avviso W-38</p> <p><b>Bolo annullato</b></p> <p>Bolo annullato</p> <p>Qtà erogata <b>1,50 U</b> Qtà impostata <b>5,00 U</b></p> <p>OK</p>	<p><b>162</b> mg/dL 06:55, 29 mar 2018</p> <p><b>192 U</b></p> <p>Profilo 1 <b>0,70 U/h</b></p> <p>Bolo prolungato <b>2,00 U</b> 30 m</p> <p>Nuovo bolo +</p> <p>Menu principale  Aggiungi dati</p>
<p>Tocca <b>OK</b> per confermare l'avviso.</p>	<p>Il bolo è stato annullato e cancellato dal quadro generale.</p>

## USO DELLA FUNZIONE DI PROROGA

### Descrizione della funzione di proroga


In alcune situazioni (ad es. gastroparesi) può essere utile avviare l'erogazione di un bolo dopo aver iniziato a mangiare. Impostando il ritardo di erogazione del bolo puoi definire un tempo di proroga fra l'impostazione di un bolo e l'inizio della sua erogazione. Se è attivo il ritardo di erogazione del bolo, ogni volta che imposti un bolo appare il campo relativo al ritardo di erogazione oltre a quelli per la quantità del bolo e l'arco di tempo. Puoi impostare una proroga di 0, 15, 30, 45 o 60 minuti. Consulta il tuo medico curante in merito all'impostazione del tempo di proroga più adatto per la tua terapia. Per utilizzare questa funzione, devi innanzi tutto attivarla: Consulta ([Sistema di microinfusione Accu-Chek Solo](#)) [Capitolo 13.5, Impostazioni del bolo](#).

#### **Nota**

Non è possibile impostare il ritardo di erogazione del bolo, se il bolo programmato prevede una quantità d'insulina del bolo di correzione.

### Ritardo dell'avvio dell'erogazione del bolo

01	02	03
<p>Seleziona una delle 3 opzioni di erogazione del bolo menzionate nella sezione “Bolo standard”. Esegui le opportune operazioni finché appare lo schermo Immissione dati sul bolo.</p>	<p>Tocca <b>Bolo</b>.</p>	<p>Tocca <b>Proroga</b>.</p>

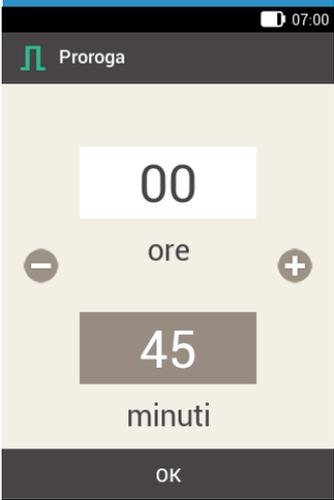04	05	06
		
<p>Usa <b>-</b> e <b>+</b> per impostare il tempo di proroga.</p> <p>Tocca <b>Salva</b>.</p>	<p>Tocca <b>Bolo</b>.</p>	<p>Per confermare questa operazione ed erogare il bolo standard, premi il pulsante insulina.</p>

07

<p>Il display visualizza lo schermo generale con i dettagli del bolo attuale.</p>

Approvato/elencato/registrato sotto il nome di prodotto:  
sistema di microinfusione Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK  
SMART PIX,  
ACCU-CHEK SOLO e FASTCLIX sono marchi di Roche.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di  
Bluetooth SIG,  
Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Roche è concesso in licenza.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi  
proprietari.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)

